


P BVM Help


(一)時機：需要使用 BVM 給氧時可考慮搭配操作。

(二)操作步驟：

1. 打開電擊器/生理監視器電源。
2. 取出 BVM，組裝球體及面罩(如有給氣測量 AccuVent 導線可一起組裝，如圖)。
3. AccuVent 感應器接上 AccuVent 導線時，正確連接好時，感應器上會顯示藍燈。

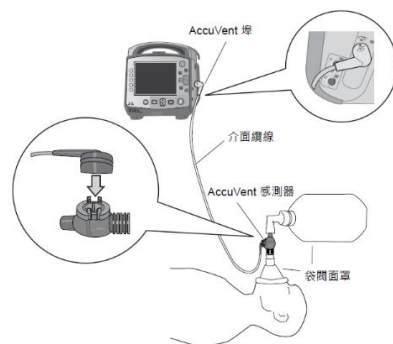

4. 通氣手通氣時，看到胸部起伏即可，同時觀察電擊器/生理監視器，參考面板反饋設備進行給氣調整。

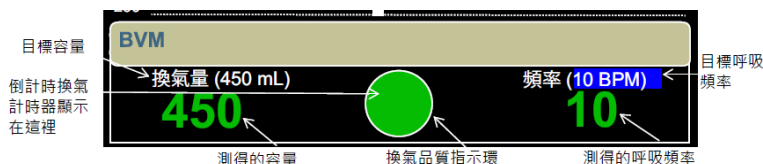

(三)注意事項：

1. AccuVent 感測器僅用於成人病患。使用 CPR 回饋貼片時，生理監視器螢幕上會顯示 CPR 儀表板，依照提供胸部深度和速率回饋的音訊(AED 或監視器/去顫器應放置在壓胸者可以看到心肺復甦術回饋提示)。
2. AccuVent 感測器測量穿過感測器的空氣流量時，請確保面罩與病患之間密封緊密。
3. 當換氣頻率設定為 30:2 時，測得的換氣率不會顯示在 BVM 即時幫助視窗中。
4. BVM Help 顯示測量的換氣量在配置的目標容量之內還是之外。如果測得的換氣量在配置目標的 ± 50 ml 範圍內，則顯示為綠色；如果在該目標之外，則顯示為黃色。